



AYO



MANUEL

INTRODUCTION RAPIDE

Ce guide de démarrage rapide concis vous fournit des instructions étape par étape pour configurer et commencer à utiliser votre AYO de façon transparente!

Nous vous avons également fourni une vidéo d'instructions que vous trouverez à:

 **GOAYO.COM/SETUP**

Enfin, n'hésitez pas à lire tous les conseils supplémentaires sur la façon de profiter du meilleur de votre AYO à:

SUPPORT.GOAYO.COM

Avant de commencer, prenez le temps de vous assurer que vous avez les éléments fournis suivants:



1 Étui AYO




1 Câble de recharge USB



1 Lunettes AYO


ÉTUI RIGIDE AYO

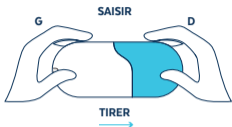

Pour ouvrir l'étui AYO



LUNETTES AYO

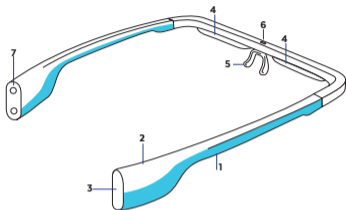

- 1** Monture compact et pliable de haute qualité
- 2** Capteur capacitif
- 3** BLE (Bluetooth à basse consommation)
- 4** Prisme de diffusion de la lumière de traitement
- 5** Plaquette de nez ajustable
- 6** Détecteur de lumière ambiante
- 7** Batterie rechargeable longue durée

INSTALLATION DE L'APPLICATION AYO



utilisateurs iOS, accédez à App Store
et installez l'application goAYO



utilisateurs Android, accédez à Google Play
et installez l'application goAYO

ENREGISTREZ VOTRE COMPTE AYO

Suivez les instructions sur écran

! Assurez-vous d'avoir une connexion internet/
WiFi stable sur votre appareil portable.

ASSOCIEZ L'APPLICATION À VOTRE AYO

! Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil portable est activé et que AYO se trouve à proximité - à moins d'un mètre.

! Pour les utilisateurs Android, assurez-vous d'avoir activé les services de localisation.

1 Activez votre appareil AYO en dépliant ses branches.



2 Lorsqu'il est allumé, AYO clignote 3 fois (charge suffisante) ou 5 fois (charge insuffisante). Dans le cas où il clignote 5 fois, consultez la page 11 sur la façon de charger votre AYO avant de passer à l'étape 3.



3 Numérisez le code QR du numéro de série ou saisissez le code du numéro de série manuellement. Vous trouverez le code au fond de l'étui AYO.




4 Vous recevrez le message de confirmation de réussite de l'association.

FINALISEZ LA CONFIGURATION


- 1** Dépliez l'appareil portable AYO (dépliez ses branches) et mettez-le sur votre tête.
- 2** Lancez la session de démonstration AYO et suivez les instructions sur écran.

BONNE POSITION D'AYO

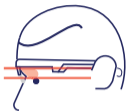


**NON
TROP HAUT**

La lumière ne pourra pas entrer dans vos yeux

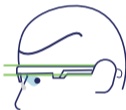

**OUI
PARFAIT**

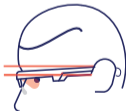

**NON
TROP BAS**

L'appareil AYO bloquera votre vision

AYO ET LUNETTES DE PRESCRIPTION

1 AYO est conçu pour permettre une utilisation avec la plupart des montures de lunettes de prescription.



2 Pour le faire, le mieux est de plier la plaquette de nez flexible horizontalement. Ne vous inquiétez pas la plaquette flexible peut être repliée dans sa position normale.




AYO peut également être utilisé avec des lentilles oculaires sur ordonnance et des lentilles teintées.

- ! L'utilisation de lunettes peut interférer avec la diffusion de la lumière d'AYO, rendant AYO moins efficace.
- ! Pour des meilleurs résultats, utilisez AYO sans lunettes de prescription.

DÉSACTIVATION D'AYO


1 Lorsque vous retirez l'appareil AYO de votre tête, le voyant AYO s'éteint.

Cependant, AYO est maintenant en mode veille et toujours actif.

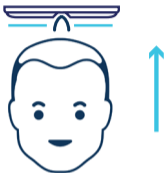

2 Pour éteindre AYO, pliez les branches et AYO s'éteindra automatiquement.

3 Assurez-vous toujours de plier d'abord la branche DROITE et puis la branche GAUCHE.

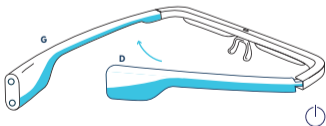

! Lorsque vous n'utilisez pas AYO, gardez-le dans l'étui.

PLACER/ SORTIR VOTRE AYO DE L'ÉTUI


1 Ouvrez l'étui en tenant sa partie bleue et en la faisant glisser hors de l'étui.



2 Insérez l'appareil dans l'étui, en le posant à plat sur sa monture à l'intérieur de l'étui et le prisme dirigé vers le haut.

Pour assurer la position de charge correcte, assurez-vous que l'appareil s'adapte bien à l'intérieur et reste à plat.

! Assurez-vous que les branches AYO sont repliés avec la branche gauche à l'extérieur.

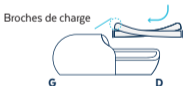

3 Fermez l'étui en faisant glisser la partie bleue de l'étui en place. Assurez-vous qu'il clique en toute sécurité.



CHARGEMENT DE L'AYO

Votre appareil AYO dispose de deux batteries, l'une dans l'appareil et l'autre dans l'étui.

1 Pour recharger l'appareil AYO, placez-le dans l'étui et assurez-vous qu'il est bien ajusté et qu'il y repose à plat.



2 Pour recharger l'étui AYO, branchez le câble USB fourni dans l'étui et branchez l'autre extrémité du câble sur une prise d'alimentation, un ordinateur portable ou un autre appareil électronique.



! L'adaptateur de prise d'alimentation n'est pas fourni.

3 Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil AYO, gardez-le dans l'étui pour le protéger et il arrêtera automatiquement le chargement une fois la batterie pleine.



! Avant la première utilisation, il est conseillé de recharger AYO pendant 6 heures.

AYO À LA VOLÉE

1 En débranchant l'étui du câble USB ou de l'adaptateur secteur, vous pouvez facilement emporter l'étui avec vous.

2 L'étui possède une banque d'alimentation intégrée, ce qui signifie que vous pouvez toujours charger votre appareil AYO en déplacement!



3 Pour vérifier l'état de la batterie de l'étui AYO, appuyez sur l'indicateur lumineux à l'extérieur de l'étui et les indicateurs de niveau de la batterie s'allumeront.



! Portez toujours votre appareil dans l'étui afin de le protéger des endommagements.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, ALERTES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL AYO

AYO est une technologie portable avancée comprenant l'appareil AYO et l'application AYO offrant une expérience lumineuse personnalisée. **AYO n'est pas un dispositif médical** et n'est pas destiné à guérir, traiter ou diagnostiquer une maladie ou une condition médicale. Les effets de la technologie AYO peuvent varier en fonction de l'application individuelle et de la durée d'utilisation. Les avertissements et les mises en garde figurant dans les informations sur le produit ne constituent pas un avis médical et ne peuvent pas remplacer la consultation d'un médecin. Nous vous recommandons de consulter un médecin avant d'utiliser la technologie AYO, si vous n'êtes pas certain des effets de son interaction avec des médicaments ou des conditions médicales et des maladies. La technologie AYO doit être utilisée strictement en accord avec les instructions, les avertissements et les mises en garde fournis dans la boîte de produit et dans l'application AYO.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des endommagements.

AVERTISSEMENTS

Les enfants de moins de 4 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil AYO en tout temps.

La technologie AYO n'est pas adaptée à être utilisée et il n'est pas recommandable d'être utilisée par:

- Les enfants de moins de 18 ans;
- Les personnes qui ont ou ont eu une maladie oculaire telle que la cataracte, le glaucome, les dégénérescence maculaire ou autre trouble de la rétine ou qu'elles ont subis une opération oculaire antérieure;
- Les personnes qui ont une sensibilité à la lumière, l'épilepsie ou des antécédents de convulsions;
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou les personnes ayant une expérience et / ou des connaissances insuffisantes pour utiliser un tel dispositif.

Consultez un médecin avant d'utiliser la technologie AYO:

- Si vous souffrez de trouble bipolaire (*mania-co-dépression*), SAD (*trouble affectif saisonnier*) ou si vous avez des antécédents de maladie oculaire dans la famille.
- Si vous utilisez des médicaments photosensibilisants, la lumière pourrait changer l'efficacité de certains médicaments (*par exemple, les antibiotiques, les antihistaminiques, les médicaments de chimiothérapie, les médicaments cardiaques, diabétiques et cutanés, etc.*).

ARRÊTEZ D'UTILISER L'APPAREIL AYO

si vous ressentez un malaise tel qu'un mal de tête, une bouche sèche, une fatigue oculaire, des nausées ou une hyperactivité. Essayez d'utiliser AYO à nouveau dans quelques jours avec des paramètres d'intensité plus basse.

Comme c'est le cas pour toute source de lumière intense, **NE REGARDEZ PAS** directement dans la source de la lumière elle-même.


NE L'UTILISEZ PAS au-delà de la durée recommandée par jour ou en dehors de la période recommandée par votre médecin ou par l'application AYO ; cela peut entraîner des maux de tête, des nausées, une fatigue oculaire, une hyperactivité ou des difficultés à s'endormir.

NE RECHARGEZ PAS l'appareil AYO qu'avec le câble de recharge fourni dans l'étui AYO. N'utilisez jamais de cordons ou de fiches endommagés ou usés ; cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures et / ou un incendie.

NE L'UTILISEZ PAS, si l'appareil AYO ou son boîtier sont endommagés de quelque façon que ce soit ou s'il ne fonctionne pas correctement et contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

N'EXPOSEZ PAS l'appareil AYO à des températures élevées, à la lumière directe du soleil et **NE L'UTILISEZ PAS** à proximité de sources de chaleur et d'appareils.

N'utilisez jamais l'appareil près d'une flamme ouverte. L'appareil AYO dispose d'une batterie interne rechargeable et les batteries peuvent surchauffer et provoquer un incendie ou un éclatement.

 Entretenez l'appareil AYO sec. Les zones de stockage doivent être sèches. **NE L'IMMERGEZ PAS ET NE L'EXPOSEZ PAS** à l'eau et à l'humidité (*par exemple, ne pas utiliser dans une douche, un bain, une piscine, etc.*).

NE L'UTILISEZ PAS dans des situations où la stimulation électrique ou la lumière peut compromettre votre capacité à effectuer des tâches essentielles ou à vous exposer à d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines.

N'OUVREZ ET NE MODIFIEZ pas l'appareil AYO. Un changement de toute caractéristique de la conception originale (*mécanique, électronique, logiciels, etc.*) peut entraîner un dysfonctionnement, la perte de fonctionnalité et peut affecter la sécurité du produit. Toute modification de l'appareil AYO entraînera la perte totale de toute garantie et la responsabilité du fabricant.

PRÉCAUTIONS

Laissez reposer l'appareil AYO pendant au moins 1 heure après l'avoir déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud. Risque d'eau de condensation à l'intérieur de l'appareil.

Évitez d'appliquer une contrainte mécanique sur l'appareil AYO, comme forcer ou plier les branches ou d'appliquer toute force statique.

N'UTILISEZ PAS l'appareil AYO sur la poitrine, le cou ou autour de la bouche.

N'UTILISEZ PAS l'appareil AYO en portant des lunettes photochromiques ou teintées.

Évitez le contact de l'appareil AYO avec des produits chimiques (tels que la laque). Nettoyez en essuyant avec un chiffon sec en évitant les lumières.

L'appareil AYO est destiné à être utilisé par une seule personne. Si, néanmoins, vous partagez l'appareil avec quelqu'un, veuillez prêter attention à assurer l'hygiène des branches de l'appareil AYO.

Le fabricant n'assume pas et rejette toute garantie, expresse ou implicite, orale ou écrite, ou statutaire concernant la technologie et l'appareil AYO, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ou liées à l'efficacité, la performance ou l'amélioration du produit. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage ou perte direct, indirect, accessoire, punitif ou consécutif (y compris toute perte de profit ou d'affaires) qui résulte de ou en relation avec la vente, l'utilisation, mauvaise utilisation ou tout défaut de la technologie et du dispositif AYO en vertu de toute théorie juridique, que ce soit en cas de rupture de contrat, le délit (y compris la responsabilité en cas de négligence), la responsabilité stricte ou autre, que cette perte ou dommage soit raisonnablement prévisible et en aucun cas dépasser le prix d'achat d'origine de l'appareil. Si un terme en vertu de cette clause est jugé illégal ou inapplicable, un terme de remplacement est réputé avoir été inséré qui n'est pas illégal et reflète le mieux la signification du terme annulé et la légalité ou l'applicabilité des termes restants ne doit pas être affectée ou altéré.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou la limitation de la responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans ces juridictions.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Confiez toute entretien de l'appareil AYO à du personnel qualifié. Le service est requis lorsque l'appareil AYO a été endommagé de quelque façon que ce soit, y telles que:

- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité;
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque les instructions d'utilisation sont respectées;
- Si l'appareil a été abimé ou que l'étui a été endommagé.

Le fabricant garantit uniquement la sécurité, la fiabilité et les performances de cet appareil dans les conditions suivantes:

- L'installation, l'extension, le réajustement, les modifications ou les réparations sont effectués par le fabricant ou par du personnel autorisé;
- L'appareil est strictement utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

Pour que votre garantie soit valide, l'appareil AYO doit toujours être stocké lorsqu'il n'est pas utilisé dans l'étui AYO pour être protégé contre la chaleur, l'humidité et les bris accidentels.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Nous confirmons par la présente que les produits décrits ci-dessus sont conformes aux directives suivantes:

EUROPE

CE EMC EN 55014, EN 61000-4-3

AYO™ est classifié comme le dispositif qui est sans danger pour les yeux conformément à la norme internationale IEC 62471.

Directive 2014/30/UE (CEM)

EN 55014-1:2006 +A2:2011

EN 55014-2:2015

Directive 2011/65/UE (RoHS)

IEC 62321:2008

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-5:2013

Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE

EN 62479:2010

EN 300328:2015

EN 301489-1:2011

EN 301489-17:2012

Les produits décrits ci-dessus sont conformes à la Directive RoHS 2011/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 08/06/2011 concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

ÉTATS-UNIS

FCC Titre 47, Chapitre 1, Partie 15, Classe B

FCC VOC:

47 CFR PARTIE 15 OCT, 2016, Classe B

ANSI C 63.4:2014

CANADA

Industrie Canada (IC):

ICES-003 Publication 6, Janvier 2016, Classe B

Au fur et à mesure que le produit évolue et se développe sur de nouveaux marchés, la liste actuelle des certifications AYO est en constante expansion. Pour obtenir une liste complète des certifications, veuillez consulter notre site Web:

www.goayo.com.



RECYCLAGE

Cet appareil est conforme à la **Directive 2012/19/UE DEEE**. L'appareil AYO ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, mais doit être recyclé aux points de collecte appropriés pour les équipements / déchets électriques et électroniques.

Ce produit peut ne pas être disponible dans tous les pays du monde. Il n'a peut-être pas reçu d'approbation ou d'autorisation de mise en marché de la part des organismes de réglementation gouvernementaux pertinents dans les pays où il est utilisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Lunettes AYO: 155 x 65 x 23 mm (6.1 x 2.6 x 0.9 in), taille unique Étui AYO: 173 x 80 x 65 mm (6.8 x 3.1 x 2.6 in)
Poids	Lunettes AYO: 35 grammes (1.2 onces) Étui AYO: 180 grammes (6.3 onces)
Technologie de la solution d'éclairage	4 Diodes électroluminescentes (LED), technologie diffuseur de la lumière
Propriétés de la lumière	Longueur d'onde dominante Environ 470nm ± 2nm Sans lumière UV et IR Moitié de la bande passante 22nm Irradiance typique (100% d'intensité) Environ 250 µW/cm ²
Impulsion lumineuse	1,000Hz (Cycle de service, D=25-100%)
Durée de vie utile	>10,000 heures

Batterie	Lunettes AYO: Batterie intégrée rechargeable polymère Li-ion, 3.7V, 100mAh Étui AYO: Batterie rechargeable polymère, 3.7V, 500 mAh
Durée de vie de la batterie	Lunettes AYO: Jusqu'à 3 heures / 6 sessions AYO Étui AYO: Jusqu'à 10 heures / 20 sessions AYO Temps de recharge (0% à 100% de capacité): Environ 3 heures
Température ambiante (de fonctionnement)	Température: 0-40°C

AVIS JURIDIQUE

C) Copyright 2016-2018, 2018 Novalogy Inc.
AYO est une marque déposée de Novalogy Ltd.
www.goayo.com est la propriété de Novalogy Inc.

Novalogy Inc.
340 S LEMON AVE #8535
WALNUT, CA 91789
UNITED STATES
info@goayo.com

Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisé par Novalogy Inc. sous licence.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services de Novalogy sont énoncées dans les déclarations de garantie express accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne devrait être interprétée comme la constitution d'une garantie complémentaire. Novalogy ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriaux contenus dans le présent document.

En cas de de divergences entre les versions traduites de ce manuel, la version anglaise prévaudra.

Troisième édition:
JUIN 2018



GOAYO.COM